




Avant toute utilisation, veuillez tout d'abord brancher le Roll-IT, à l'aide du cordon en spirale fourni, au réseau et chargez la batterie pendant au moins 8 heures, sans interruption, avant de l'utiliser pour la première fois.

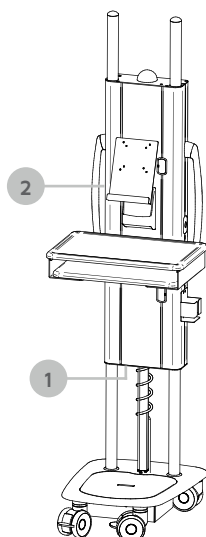

1. Le PC intégré peut être démarré avec l'interrupteur situé en haut du Roll-IT. Une fois le système d'exploitation éteint, le PC peut de nouveau être démarré en mettant l'interrupteur sur la position off et on.

NOTE : L'indicateur LED reste actif, y compris lorsque l'interrupteur est en position off. L'indicateur LED ne s'éteindra que lorsque le Roll-IT sera passé en mode veille en raison d'une batterie trop peu chargée.

2. La hauteur du Roll-IT est réglable électriquement. L'interrupteur position haute/basse se trouve sur le côté gauche de l'appareil.



Veillez à ce que le chariot ne soit pas heurté, ni ne heurte d'autres personnes ou objets lors du paramétrage de la hauteur.

» Indication chargement batterie

Le système de chargement du Roll-IT indique le niveau de chargement batterie restant au moyen d'un indicateur LED au-dessus de l'appareil et de l'application Battery Monitor sur le bureau du PC (uniquement lorsque l'application est installée, pas d'application pour le Thin client notamment).



Ouvrir l'application Battery Monitor :

1. Positionnez le curseur sur la barre de système en bas à droite et faites un clic droit sur l'icône
2. « Show » ouvre l'application
3. Sélectionnez « Always on top » pour garder l'application en avant-plan
4. « Exit » ferme l'application.



Le chargement de la batterie est compris entre 100 % et 70 %.

La LED clignote lorsque le Roll-IT est relié au réseau électrique. **Chargez la batterie le plus souvent possible jusqu'à ce que l'indicateur LED arrête de clignoter.** La batterie sera alors chargée à 100 %.



Le chargement de la batterie est compris entre 69 % et 40 %.



Le chargement de la batterie est compris entre 39 % et 10 %.

L'utilisation fréquente du Roll-IT avec un pourcentage de batterie de 30 % ou moins raccourcit considérablement la durée de vie de la batterie.



Lorsque la LED rouge clignote, cela signifie que la batterie a un chargement de moins de 10 %.

Branchez immédiatement le Roll-IT au réseau électrique et chargez la batterie jusqu'à 100 %.



Lorsque le chargement de la batterie arrive à 5 %, cette fenêtre pop-up apparaîtra. Au bout d'un certain nombre de minutes, le PC et l'indication LED s'éteignent. Le Roll-IT passe en mode veille.

Branchez immédiatement le Roll-IT au réseau électrique et chargez la batterie jusqu'à 100 %.

» Directives importantes pour l'utilisation quotidienne du Roll-IT

- Lorsque vous déplacez le chariot, adaptez votre vitesse aux conditions directes. Afin de garder le contrôle du chariot lors de situations inattendues, il convient de ne jamais avancer le chariot plus rapidement qu'un rythme de marche normal (4 à 5 km/h).
- Utilisez les poignées pour déplacer le chariot. Ne déplacez jamais le chariot à l'aide des guides en aluminium.
- Veillez à ce qu'aucun objet placé sur le chariot ne soit laissé sans fixation lorsque ce dernier est mis en mouvement.
- La charge maximale du plan de travail est de 25 kg.
- La charge maximale du plan de travail rabattable est de 10 kg.
- Assurez-vous que la prise soit retirée avant de placer le Roll-IT. Ne tirez jamais sur le câble. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.
- **Connectez le Roll-IT le plus souvent possible avec le réseau électrique. Chargez la batterie tous les jours à 100 %.**
- Lors du déplacement du chariot, vérifiez si les freins des roulettes ont été déverrouillés.

Pour obtenir l'ensemble des instructions, consultez la notice jointe ou connectez-vous sur www.belintra.com/fr/downloads.