


Esterilla de silicona

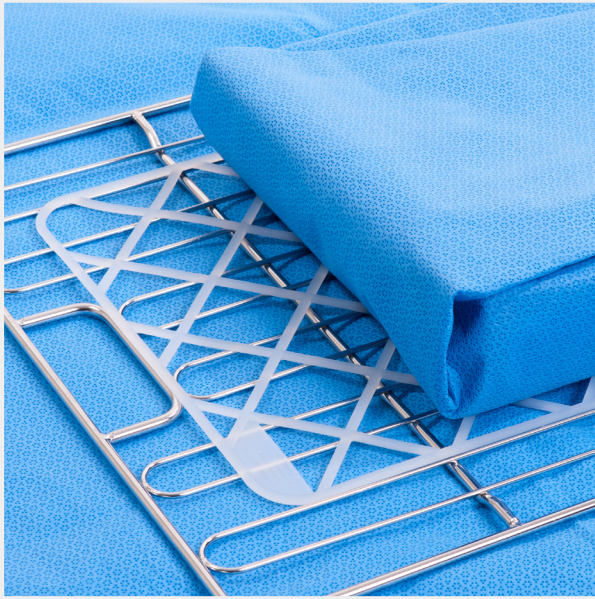

La esterilla de silicona se utiliza principalmente en el departamento de esterilización central y se coloca entre la cesta de instrumentos empaquetados y la bandeja o cesta de alambre.

Gracias a sus excelentes propiedades antideslizantes, la cesta de instrumentos embalada permanece en su sitio y no se mueve.


En combinación con los estantes de alambre y las cestas Sterisystem® Perfo-Safe®, las alfombrillas de silicona son una parte indispensable del almacenamiento y el transporte estériles.

El material del que está hecha la esterilla de silicona es resistente al desgaste y a los productos químicos y bacterias, lo que la hace perfectamente adecuada para su uso repetido en el departamento de esterilización central.




» Función antideslizante

Dado que la cesta de instrumentos embalada no se mueve durante el transporte, se evita cualquier daño o perforación que pudiera producirse en el material de embalaje, garantizando los requisitos de esterilización dentro del departamento central de esterilización.

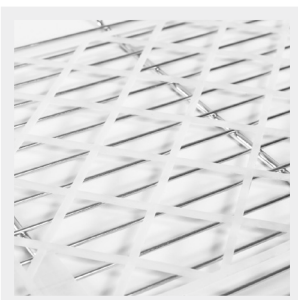

» Silicio


El material del que está hecho la esterilla de silicona cumple los requisitos de la Directiva europea 2002/72/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, y es resistente a temperaturas de -40 °C a 200 °C. Este material es resistente al desgaste y a los productos químicos y bacterias, y corresponde al más alto grado de seguridad contra incendios. Por lo tanto, es perfectamente adecuado para un uso repetido en el departamento de esterilización central.

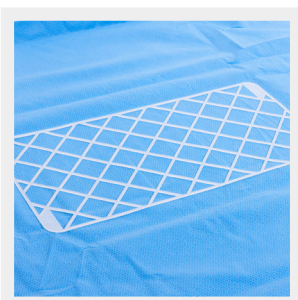

» Diseño específico

Su diseño específico garantiza una distribución uniforme del calor y una perfecta permeabilidad del vapor dentro del autoclave. El color estándar es el blanco. La versión delgada es adecuada para el transporte interno, mientras que la versión "heavy duty" de 6 mm de grosor es adecuada para el transporte externo.

» Esterilla de silicona

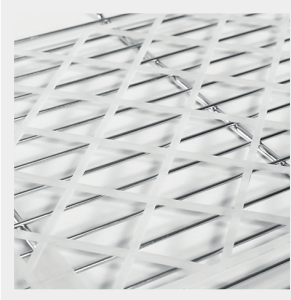

» Esterilla de silicona para cestas de alambre y estantes de alambre Sterisystem® Perfo-Safe®

Número de artículo	Descripción	Espesor	GTIN	Dimensiones ext.
30010 00004	Standard	3 mm	05404019100952	540 x 280 mm
30010 00006	Heavy duty	6 mm	05404019100969	600 x 324 mm